



new feet
MEDICAL FOOTWEAR

Fodtøj til følsomme fødder

www.new-feet.com



svangstøtte

212-22

*Se vores flotte kollektion
efterår & vinter 2021*



212-22

svangstøtte

Sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



212-22

svangstøtte

Brunt kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



212-12

svangstøtte

Sort kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



212-12

svangstøtte

Brun olieimprægneret nubuck · Orthostretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



192-82

svangstøtte

Sort olieimprægneret kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



192-82

svangstøtte

Brunt olieimprægneret kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43

Vidste du at

Alle vores støvler har
udtagelig indersål !



svangstøtte

212-12



svangstøtte
212-20



svangstøtte
192-81



212-20

svangstøtte

Sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



192-81

svangstøtte

Cognac eller sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



192-83

svangstøtte

Sort, cognac eller brunt kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



192-83

svangstøtte

Cognac, sort eller brunt kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



172-14
Sort kalveskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



192-55
Sort kalveskind m. struktur · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



192-55
Sort eller cognac kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



212-10
Sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



202-20

Terra cotta eller sort hydro-ruskind · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43



202-21

Blåt kalveskind m. struktur · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



202-21

Sort kalveskind · Orthostretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



212-31

Sort gedeskind m. print · Orthostretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



202-25

Sort kalveskind · 2 Lynlåse
Læste W · Str: 36-43



212-21

Sort eller blåt kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43 · 36



svangstøtte
212-15



212-15

svangstøtte

Brunt kalveskind m. struktur eller sort kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



202-32

svangstøtte

Blåt eller sort hydro-ruskind · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



212-32

Sort hydro-ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43



172-21

Sort kalveskind eller brunt olieimprægneret kalveskind · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43



172-22

Sort kalveskind · OrthoStretch · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43 · <



212-32

Brunt hydro-ruskind · Lynlås
Picos® membran · Læste W · Str: 36-43

Vidste du at

Alt vores fodtøj har en
6 mm støddæmpende
Protektor® indersål !



202-37

Sort kalveskind · OrthoStretch® · 2 Lynlåse
Læste M · Str: 36-43



182-31

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste S · Str: 36-43



212-28

Sort hydro-ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43



212-28



212-26



212-26

Sort ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Picos® membran · Læste M · Str: 36-43 · ✂

OrthoStretch®

er som en handske til **din** fod

Vores fødder er forskellige ! Derfor skal New Feet fodtøj kunne tilpasses dine individuelle behov. Fodtøj med stretch er yderst komfortabelt, og kan anvendes af alle, der sætter komfort højt.

Men OrthoStretch® har også en vigtig funktion for mennesker med knyster, hammertæer, hævede fødder, gigt, diabetes og til brugere af bandager eller støttestrømper. OrthoStretch® er elastisk i alle retninger.



Høj komfort

Ønsker du fodtøj, hvor intet klemmer - men du stadig har følelsen af at skoene sidder godt uden at stramme.

- så er OrthoStretch® det rigtige valg.



Knyster

Fødder med knyster har behov for plads.

Men samtidig har du behov for fodtøj, der sidder godt på foden.

OrthoStretch® giver fleksibilitet omkring knysten.



Hammertæer

En fod med hammertæer har behov for god plads over tæerne.

OrthoStretch® giver mulighed for plads - **uden** at fodtøjet skal designes ekstra højt.



Diabetes

Mennesker med diabetes skal være meget opmærksomme på fødderne.

OrthoStretch® følger fodens bevægelser og giver mindre risiko for hård hud og trykskader.





212-25

Sort gedeskind m. print · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



212-17

Sort kalveskind m. struktur
Læste M · Str: 36-43

svangstøtte



212-30

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

svangstøtte



201-15

Terra cotta ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

svangstøtte



201-15

Sort eller oliven hydro-ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43

svangstøtte



212-25



212-34
Sort kalveskind
Læste S · Str: 36-43



212-34
Sort kalveskind m. struktur · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43



101-16
Sort, blå kalveskind eller bordeaux gedeskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · ☞

Vidste du at

Alle vores velcroremme
kan tilklippes, så de passer
til DIN fod !



172-40
Sort kalveskind eller blå olieimpregneret kalveskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · ☞



212-11

Sort eller bordeaux godeskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · ☞



172-08

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste S · Str: 36-43 · ☞



212-18

Blåt kalveskind m struktur · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43



212-18

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43



212-18

Natur godeskind m. struktur · OrthoStretch® · Lynlås
Læste S · Str: 36-43

*Pas godt på dine fødder...
de skal bære dig hele livet!*





212-33

Sort olieimpregneret ruskind · OrthoStretch® eller
blåt olieimpregneret ruskind m. membran · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



212-24

Sort kalveskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste W · Str: 36-43



202-16

Sort gedeskind m. struktur eller blåt gedeskind m. struktur
Elastiksnøre m. snaplås · Læste W · Str: 36-43



202-72

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 36-43 · 3<



202-30

Sort eller blåt kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 36-43 · 3<



212-23

Blåt eller sort ruskind · OrthoStretch® · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



212-27

Grønt eller blåt hydro-ruskind · Lynlås
Læste M · Str: 36-43



212-36

Sort nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 36-43



202-36

Sort ruskind · elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47



201-56

Blå nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47



201-56

Grå nubuck · Elastiksnøre m. snaplås
Læste M · Str: 41-47



81-47

Grå nubuck
Læste W · Str: 41-49 · ☞



81-47

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 40-49 · ☞



201-61

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 41-47 · <



201-62

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste M · Str: 41-47



182-24

Sort kalveskind · OrthoStretch® eller grå nubuck
Læste W · Str: 41-48



192-49

Sort kalveskind · OrthoStretch®
Læste W · Str: 41-47



201-61

Vidste du at ...
Alle vores sko har en
stabil hælkappe !





212-13



172-51

Sort, gråt, dybrød eller blåt filtet uld
Læste M · Str: 36-43 · ☞



172-51

Dybrød, sort, gråt, eller blåt filtet uld
Læste M · Str: 36-43 · ☞



212-14

Blåt eller gråt filtet uld
Læste W · Str: 36-43 · ☞



212-13

Blåt filtet uld
Læste W · Str: 36-43 · ☞

Vidste du at

Alle vores hjemmesko har en 6 mm støddæmpende indersål som er udtagelig !



212-14



152-85

Gråt, dybrød eller sort filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · ☞



152-85

Sort, dybrød eller gråt filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · ☞



162-76

Dybrød, sort, gråt eller blåt filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · ☞



162-76

Blåt, sort, gråt eller dybrød filtet uld
Læste S · Str: 36-43 · ☞



192-73



192-97

Gråt filtet uld

Læste M · Str: 36-47 · 3<



192-73

Gråt eller sort filtet uld

Læste W · Str: 36-47



202-68

Sort eller bronze mikrofiber

Læste M · Str: 36-43 · 3<

svangstøtte



192-74

Sort eller gråt filtet uld

Læste W · Str: 36-47



201-49

Sort mikrofiber

Læste M · Str: 41-48 · 3<

svangstøtte



192-75

Natur, sort eller gråt filtet uld

Læste W · Str: 36-43



152-56



162-79

Sort kalveskind
Læste M · Str: 41-47 · ☞



152-56

Gråt filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · ☞



152-26

Gråt filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · ☞



152-26

Sort filtet uld
Læste M · Str: 41-47 · ☞

Fødder er forskellige

derfor er New Feet ikke helt som andre skomærker

New Feet konstruerer fodtøj ud fra den ortopædiske tradition:

KOMFORT og **BESKYTTELSE** af bevæge-apparatet er det primære mål for vores fodtøj. Vi har to kollektioner:

- **behandler kollektionen**, der anvendes af sygehuse og behandlere, og
- **forbruger kollektionen** (i denne brochure), der tilbydes mennesker, der stiller krav om komfort, har brug for plads til indlæg eller har gigt eller diabetes.

Vores fodtøj er karakteriseret ved:

- Bred forfod, høj stabilitet og sikkert hælgreb
- Blødt polstret skind og udvalgte liningsmaterialer
- Fugttransporterende og friktionsdæmpende foer
- Alle indvendige syninger er trukket tilbage, så de ikke generer huden

Strobel "handske"-konstruktion



New Feet har designet egne stabile ydersåler med specialudviklet integreret gelenk

Strobel konstruktion

Det er den tekniske betegnelse på den konstruktion, der anvendes i den ortopædiske tradition.

Vi syr overdel og mellemsål sammen som en handske, før den monteres på ydersålen. Strobel konstruktionen giver os muligheden for at integrere en gelenk. Det giver stabilitet i hælen og giver fleksibilitet i forfoden.

Resultatet er høj KOMFORT

New Feet har i hele sin designproces fokus på at fodtøjet skal give fordele for mennesker med diabetes, gigt eller følsomme fødder. Resultatet er meget komfortabelt fodtøj, der med stor glæde kan bruges af alle.

Vi er meget opmærksomme på at undgå brug af kemiske stoffer i produktionen af vores fodtøj. På fabrikken i Portugal er der fokus på EUs regulativer ift arbejdsmiljø og brug af farlige stoffer. Alle vore komponenter lever op til EUs krav. I vores brug af tekstiler mv har vi fokus på at de lever op til bæredygtige certificeringer.

Vi har fokus på diabetes og gigt

Men hvis du har konstateret sygdomme, der stiller krav til fodtøjet, er det vigtigt, at du lytter til din behandlers råd. Egne eksperimenter kan have alvorlige følger.

Vi og vore forhandlere rådgiver gerne, men det er din behandler, der har adgang til din sygdomshistorik, og dermed er behandlerens rådgivning vigtig.

Individuel tilpasning

så det passer til foden

Fødder er forskellige - derfor er en nem tilpasning af fodtøjet en af de vigtigste egenskaber ved fodtøj fra New Feet.

Det er meget vigtigt, at hælen fastholdes præcist i fodtøjet. New Feet bruger ekstra store og stabile **hælkapper** lavet af et termoplastisk materiale, der gør det muligt for professionelle behandlere at justere hælkappen til den enkelte.

Velcro-remme er ekstra lange og opdelt i felter, der tillader nem tilpasning. På den måde kan et par sko bruges af personer, der har brug for plads til hævede fødder og støttestrømper - eller indlæg og bandage evt. kun i den ene sko. Se efter < symbolen.

Lynlåse bruger vi i stadig flere modeller. I kombination med velcro eller snøre sikrer vi en god pasform og samtidig en nem måde at tage skoene på.

Læsten skal passe foden.

New Feet anvender mange forskellige læster for at opnå alsidighed i pasform og anvendelsen af ydersåler med forskellige egenskaber.

Vore læster er brede sammenlignet med andre sko, så en smal læst i Læste S (Slim) er bred i forhold til gængs fodtøj. Selvom Læsterne dækker over flere forskellige læster, så kan de bruges som rettesnor for at finde de sko, der passer til din fod.

Vær opmærksom på, at sko med OrthoStretch® giver ekstra plads.

Behandlere kan finde oplysninger om de forskellige læster og mål på vores hjemmeside.

S

Læstegruppe S - SLIM

Læsterne i denne gruppe er de smalleste i New Feet sortimentet, men vil være bredere sammenlignet med gængs fodtøj. Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

M

Læstegruppe M - MEDIUM

Læsterne i denne gruppe er midterfæltet i New Feet sortimentet. Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

W

Læstegruppe W - WIDE

Læsterne i denne gruppe er de bredeste i New Feet sortimentet. Der er forskellige læster i kategorien - de har forskellige numre.

New Feet egenskaber

BESKYT din hud på fødderne

New Feet benytter en speciel teknologi til at trække indvendige syninger ind i foret. Det gør vi primært, fordi vi har fokus på diabetikeres behov for at undgå slid- og tryksår på fødderne.

For mennesker uden diabetes bidrager konstruktionen til højere komfort.

Der er stor forskel på fodtøjet indeni

New Feet benytter **OnSteam®** som liningsmateriale i det meste fodtøj. Materialet har fremragende egenskaber med fugttransport 6 gange bedre end læder og en lynhurtig absorbering af fugt. For diabetikere har OnSteam® den store fordel, at det ikke bliver hårdt eller krakelerer, som læder kan gøre med tiden. Materialet er fri for krom og produceres uden effekt på CO₂ balancen. OnSteam® er bæredygtigt certificeret.

Picos® er vores varme foer. Materialet er bæredygtigt certificeret og er hudvenligt og egnet for diabetikere.

Materialet er på samme tid varmeisolerende og fugttransporterende. Picos® er kombineret med en vandafvisende membran - så fodtøjet er endnu mere egnet til vintervejret.

New Feet Indlægssåler

Fødderne er kroppens fundament

Som med et hus - så er fundamentet vigtigt. Det udgør grundlaget for at den øvrige konstruktion fungerer.

Den første væsentlige årsag til ondt i ryggen, lænd, hofte og knæ er påvirkninger fra hårdt underlag.

En anden væsentlig kilde til smerter er, at fodstillingen ikke er optimal. Hvis du går skævt forplanter det sig til hele kroppen - fra lændesmerter til hovedpine.

Protektor® - støddæmpende indlægssåler

I alt New Feet fodtøj placerer vi en utagelig indlægssål, der effektivt absorberer stød fra hårdt underlag. Vi kalder den for Protektor® da den beskytter din krop.

Korrektor® - korrigerende indlægssåler

New Feet fremstiller indlægssåler, der retter din fodstilling op. De kan med fordel bruges i New Feet fodtøj, der har god plads - eller de kan placeres i dit nuværende fodtøj.



Protektor®

Den vigtigste støddabsorbering er **inde i sko**en, hvor en 6 mm Protektor® sål beskytter din fod mod belastningsskader.

New Feet benytter **PROTEKTOR®** teknologi som støddabsorbering.

Materialet vi anvender til støddabsorbering er det originale **PPT®**, som vi har eksklusiv ret på at anvende til brug i fodtøj. PPT® har i mange år været det mest eftertragtede materiale til støddæmpning i den ortopædiske verden. Materialet har de bedste specifikationer på elasticitet, levetid og renhed - og har sammen med OnSteam® lining suveræne egenskaber på fugtighedstransport.

Den vigtigste del af støddabsorberingen placerer vi **inde i sko**en - så tæt på foden som muligt. Vi bruger en 6 mm Protektor® indlægssål i næsten alt fodtøj. Protektor® indlægssålerne sælges også som løse såler i 6 og 3 mm tykkelse.

Ydersålen spiller også en rolle i støddabsorberingen, men den kan aldrig bidrage nok i sig selv, da den også skal fungere som stabilt afsæt.

Korrektor®

Hvis dit fodled kipper til siden, så taler vi om fejlstilling. Fundamentet for en sundere krop er, at vi bevæger os rigtigt på fødderne.


Hvis fodleddet kipper til siden vil resten af kroppen skulle bruge energi på at kompensere for, at du går skævt. Og det giver ofte smerter i fødder, knæ, hofte, lænd og ryg.

På illustrationen kan du se, hvordan et indlæg med svangløft retter foden op.

Til højre har et indlæg løftet svangen og derved aflastet forfoden.

Hvis man ikke behandler fejlsstillinger med lav eller ingen svangbue (også kaldet platfod), så vil man på sigt få følgende komplikationer i større eller mindre grad:

- Knyster
- Hammertæer
- Smerter i forfoden
- Hælsmerter
- Dårlig gangafvikling
- Smerter i hofte og lænd

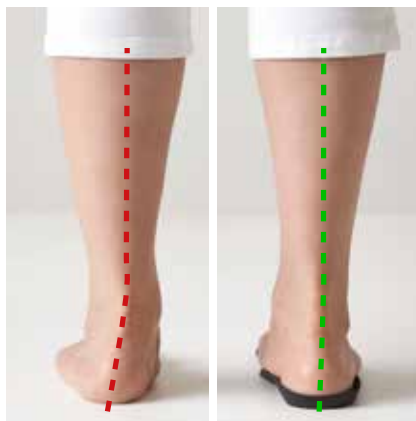

**Uden
korrigering**

**Med
korrigering**

New Feet såleprogram:

Protektor®

Basic

200-0 Protektor® Basic 6 mm
Protektor® findes som en 6mm flad sål med uovertruffen stødabsorbering. Det er den sål du finder i næsten alt New Feet fodtøj

200-3 Protektor® Basic 3 mm
Til brug i fodtøj med begrænset plads.



Korrektor®

Korrektor® fås i flere versioner - afhængig af din fejlstillingens omfang findes der også en Korrektor® til dig.

Soft

200-1 Korrektor® Soft
200-2 Korrektor® Soft ¾

Soft versionen er bygget som en sandwich af et korrigerende indlæg med 3 mm PPT® støddæmpende materiale på toppen. Det føles blødt og behageligt og løfter ikke så meget som de andre indlæg. Det fås som hel sål eller ¾ sål.



Medium • 200-21 Korrektor®

Medium ¾

Medium versionen er bygget af et materiale i medium fasthed. Fås som ¾ sål.



High • 200-22 Korrektor®

High ¾

High versionen er bygget af et mere fast og stabilt materiale. Fås som ¾ sål.



Slim • 200-32 Korrektor®

Slim ¾

Slim versionen er en slankere version af High. Fås som ¾ sål og kan med fordel bruges til smalt eller åbent fodtøj.





Det danske firma New Feet har i tæt samarbejde med nordiske behandlere og europæiske designere udviklet skoletøj til behandling og pleje af følsomme, diabetiske eller gigtramte fødder.

Vi startede op i 2004 på baggrund af et projekt i samarbejde med Bispebjerg hospitals Videncenter for Sårheling. Resultatet var en lille serie af sko og sandaler til sårpatienter. Denne første serie af professionelt fodtøj har været udgangspunktet for de efterfølgende projekter, der særligt har fokuseret på velvære og sundhed for fødderne.

Vores fodtøj anvendes af mennesker med en holdning til hvor fodtøjet produceres og med et ønske om høj komfort. Desuden også med ønske om at forebygge diabetes komplikationer, modvirke smerter ved gigt og fjerne gener fra knyster og hammertæer. New Feet fodtøj er kendetegnet ved, at det kan tilpasses den enkelte brugers behov. Derfor er der også god plads til individuelle indlæg.

New Feet er bevidste om vores fælles miljø.

Alle komponenter i fodtøjet er fremstillet i henhold til EUs standarder og miljøkrav.



www.new-feet.com

FØLG OS PÅ

